





Valve de pression  
Numéro de référence  
Respironics  
302418

Connecteur pour  
oxygène  
Cat. AirLife 004081

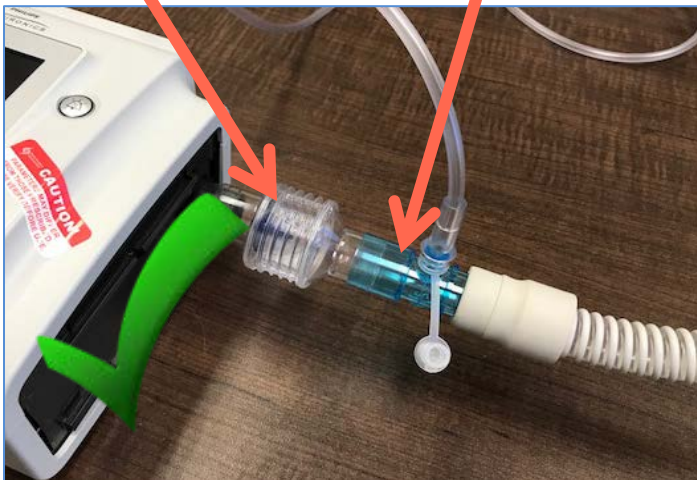

Ne pas connecter  
l'adaptateur à  
oxygène à la  
sortie de la  
machine!

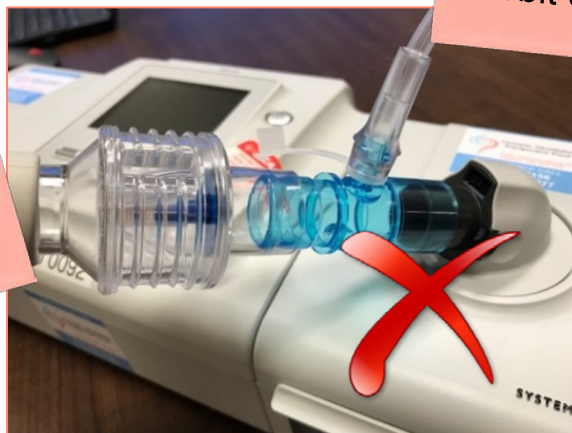

Débit d'oxygène  $\leq 10$  L/min<sup>1</sup>

L'oxygénothérapie peut être utilisée avec le BiPAP A40™ .

Pour ajouter de l'oxygène, vous aurez besoin de :

- Une valve de pression
- Connecteur pour oxygène

La valve de pression dirige le flux d'oxygène vers le patient. Il est important d'empêcher le retour d'oxygène dans la machine.<sup>1</sup>

Le connecteur d'oxygène possède une connexion pour le tube d'oxygène.

Une fois la valve de pression et le connecteur d'oxygène connectés comme indiqué à gauche, fixez le tube d'oxygène du système d'alimentation et réglez le débit comme prescrit (L/min).

## Références

1. Manuel de l'utilisateur de la BiPAP A40™ de Philips Respironics™

## Avertissement

Ces informations vous sont fournies à des fins éducatives uniquement et ne doivent en aucun cas être considérées comme une alternative aux conseils professionnels de votre médecin ou de tout autre professionnel de la santé qualifié. Le VEP n'assume aucune responsabilité quant à l'application du contenu de ce document ou pour toute information qui pourrait être présente dans les documents ou les sites Web cités comme référence. Ces références sont fournies à titre informatif uniquement et ne représentent en aucun cas l'approbation par VEP de toutes entreprises ou de tous produits. Veuillez toujours consulter un médecin et / ou un professionnel de la santé qualifié pour en apprendre davantage sur les recommandations spécifiques à vos besoins de santé.



640 Cataraqi Woods Drive | Unité 6 | Kingston, Ontario | K7P 2Y5  
Tél. : 613-548-6156 | Sans frais en Ontario : 1-800-633-8977 |  
Télec. : 613-548-6157  
Site Web : [www.ontvep.ca](http://www.ontvep.ca)